

Link do produktu: <https://redmed.pl/refundacja-nfz-testy-coaguchek-pt-inr-24-szt-pst-xs-inrange-test-paski-do-pomiaru-gestosci-krwi-p-33.html>



Refundacja NFZ | Testy CoaguChek PT INR 24 szt. PST XS INRange Test paski do pomiaru gęstości krwi

Cena	36,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	dzień roboczy do 13:00
Numer katalogowy	ROCH07671687019
Kod producenta	R07671687019
Kod EAN / GETIN	4015630943067
Producent	Roche
Refundacja NFZ	TAK, w przypadku braku refundacji w pole pesel oraz PIN wpisać 0
Producent	Roche Diagnostic GmbH
Podmiot Odpowiedzialny	Roche Professional Diagnostics
Cena NFZ	360,00 PLN

Opis produktu

Opakowanie 24 jednorazowych testów paskowych CoaguChek PST do pomiaru PT/ INR do aparatu CoaguChek XS oraz INRange.

Do badania wystarcza tylko jedna kropla krwi kapilarnej pobrana z opuszka palca, aby w ciągu 1 min. uzyskać precyzyjny wynik INR

Testy paskowe sprzedawane w pojemniku zbiorczym razem z opakowaniem zapobiegającym zawilgoceniu testów. Opakowanie każdorazowo powinno być zamykane po wyjęciu testu, z powodu na możliwość zawilgocenia pozostałych testów.

W każdym opakowaniu testów jest procesor kalibrujący, który może być wyłącznie używany z danym opakowaniem. W przypadku zagubienia tego procesora kalibrującego, testy stają się bezużyteczne.


Testy do gęstości krwi INR działają wyłącznie z urządzeniem CoaguChek XS Plus, CoaguChek XS Pro i CoaguChek INRange.

Zakres pomiarowy uzyskanych wyników: 0,8 - 8,0 INR, 8 - 80 PT.

Czułość na heparynę: Brak w przypadku heparyny w dawkach leczniczych: do 0,8 I.U/ml dla heparyny niefrakcjonowanej (UFH) i do 2 anti-Xa.U/ml dla heparyny drobnocząsteczkowej (LMWH).

Kontrola jakości: Wbudowana w każdy pasek testowy używany do oznaczeń PT/INR we krwi.

Przechowywanie: w temperaturze od 2 °C do 30 °C

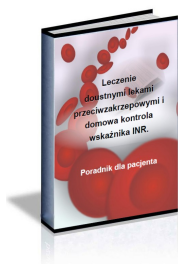

Przy zakupie testów [Poradnik dla pacjenta dotyczący leczenia doustnymi lekami przeciwwązkowymi oraz samokontroli PT/INR](#) wraz z dzienniczkiem do wpisywania wyników dla lekarza - **GRATIS!**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Refundacja NFZ: Z.04.02.00 - dorośli 18+ , Z.04.02.01 - dzieci do 18 roku (- 36,00 zł), Z.04.02.00 - inwalidzi wojenni, inw. wojskowi, osoby represjonowane (- 36,00 zł), Bez refundacji (+ 324,00 zł)

Ubezpieczenie: Standard (+ 0,01 zł)