

Link do produktu: <https://redmed.pl/refundacja-nfz-i-paski-do-inr-qlabs-24-szt-kontrola-krzepliwosci-krwi-q1-q2-q3-p-806.html>



Refundacja NFZ I Paski do INR qLabs 24 szt. kontrola krzepliwości krwi Q1 Q2 Q3

Cena	60,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	dzień roboczy do 13:00
Numer katalogowy	MPQS-1-24
Kod producenta	QS-1-24
Kod EAN / GETIN	00856003003094
Producent	.Micropoint Biotechnologies Co.,
Data ważności testów:	21-07-2025
Refundacja NFZ	TAK, W przypadku braku refundacji w pole PIN oraz PESEL wpisać 0
Producent	Micropoint Biotechnologies Co., Ltd.
Podmiot Odpowiedzialny	Obelis S.A.
Cena NFZ	384,00 PLN

Opis produktu

Jednorazowe paski testowe do systemu qLabs® do pomiaru PT/INR. Szybkie, wygodne i proste określenie wartości krzepnięcia krwi z próbki z palca. Paski będą pasowały do modeli qLabs Q1 oraz Q3,

Cechy testów do qLabs

- Zakres pomiarowy PT-INR: od 0,5 do 8,0
- Próbkę: 10 µL krwi z palca lub pełnej krwi żyłnej
- Precyzja: ≤ 5%
- Czas wykonania testu: 30~100 s.

Opakowanie pasków QS-1-24 do qLabs zawiera:

- 24 pasków testowych PT/INR
- chip kalibrujący do modelu Q3 oraz KOD Paska do Q1
- Polska instrukcja obsługi

Zaawansowana technologia produkcji pasków testowych do Monitorów INR qLabs® pozwoliła na zastosowanie dodatkowej kontroli jakości testu. Zabezpiecza to przed podawaniem nieprawdziwych wyników badania.


Do określenia wskaźnika krzepliwości krwi jest potrzebna jedynie mała próbka krwi z opuszka palca.

Paski testowe można trzymać w temperaturze pokojowej, gotowe do natychmiastowego użycia.

Paski testowe przeznaczone są do samodzielnej kontroli gęstości krwi przez pacjenta.

Zastosowana nowoczesna technologia produkcji pozwala na uzyskiwanie bardzo wysokiej precyzji i dokładności wyników.

Jednorazowe paski testowe są pakowane indywidualnie w hermetyczne opakowania foliowe, które zabezpieczają pasek przed wilgocią oraz pozwalają na wysoką jakość uzyskiwanych wyników, na równi z badaniami w laboratorium. Dodatkowo paski pakowane indywidualnie można wykorzystywać przez cały okres przeznaczony do użytku. Dzięki temu testów nie trzeba zużywać w jak najkrótszym czasie po otwarciu opakowania zbiorczego.

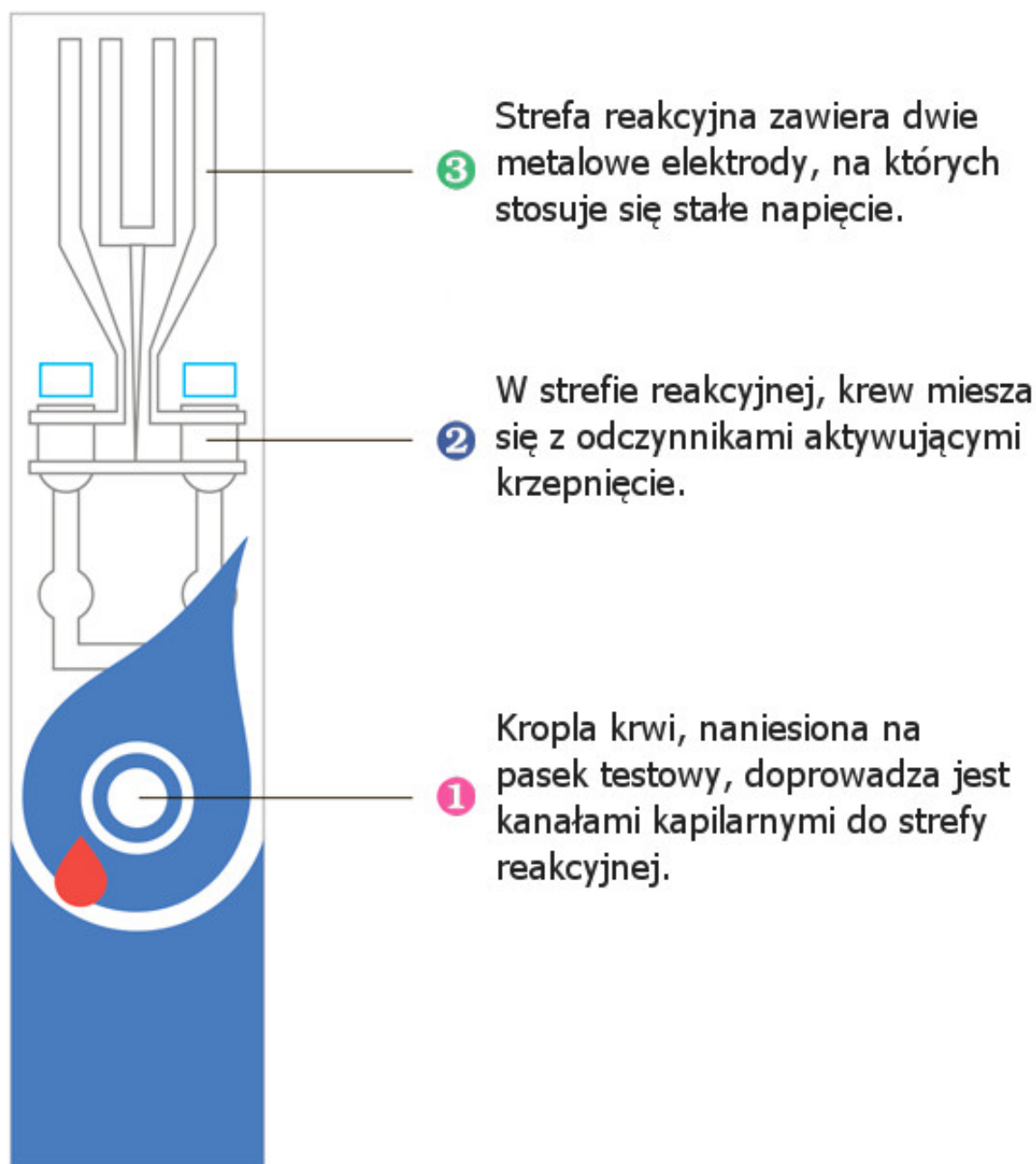

Monitor INR qLabs® to nowoczesny system do szybkiego i precyzyjnego badania czasu protrombinowego (PT) oraz oznaczenia wskaźnika INR z krwi z palca. Aparat do pomiaru INR jest łatwy i prosty w obsłudze, aby pacjent mógł wykonać samodzielnie badanie krzepliwości krwi. Monitor INR oferuje wyniki o jakości laboratoryjnej, dostępne w ciągu kilku minut, tak w punkcie opieki, jak i w domu.

Każdy pasek testowy współpracuje z wbudowaną kontrolą jakości wykonywaną podczas każdego badania, a system kontroli jakości opiera się o elementy:

- Kanał z odczynnikiem: Rekombinowana ludzka tromboplastyna.
- Kanał kontrolny: Trombina - pokazuje predefiniowane czasy krzepnięcia dla kontroli.
- Oba kanały: Środek zobojętniający heparynę.

Znak

CE 0123



Deklaracja zgodności: Urządzenie i testy qLabs firmy Micropoint spełniają wymogi norm regulacyjnych UE w zakresie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro - dyrektywa 98/79/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady ("dyrektywa IVD"). Posiadają oznaczenie znakiem CE0123 wydanym przez Niemiecki instytut ds. jakości TÜV SÜD.

Paski należy przechowywać w temperaturze poniżej 32° C do końca okresu przydatności do użycia.
Testy paskowe INR należy zużyć w ciągu 10 minut od otwarcia opakowania foliowego.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Refundacja NFZ: Z.04.02.00 - dorośli 18+ , Z.04.02.01 - dzieci do 18 roku (- 36,00 zł), Z.04.02.00 - inwalidzi wojenni, inw. wojskowi, osoby represjonow (- 36,00 zł), Bez refundacji (+ 324,00 zł)

Nakłuwacze INR: ---- Nie potrzebuję ---- , Medlance INR 23G 1.8mm 2x10szt. [HTL7006-10] Super PROMO (+ 0,02 zł)

Producent

Strona producenta www.monitorINR.com