

Link do produktu: <https://redmed.pl/podkolanowki-kompresyjne-z-bawelna-otwarty-czubek-360-den-p-191.html>

Podkolanówki kompresyjne z bawełną (otwarty czubek) - 360 DEN

Cena	109,99 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny
Numer katalogowy	podkolanowki bawelna
Zadzwoń i zamów:	+48322490070

Opis produktu

Podkolanówki przeciwżylakowe z bawełną i mikrokapsułkami AVICENUM 360 to produkt zdrowotny drugiej klasy kompresji, który wspomaga prawidłowe działanie zastawek żylnych, stabilizuje krążenie krwi i jest niezastąpionym elementem terapii uciskowej. Pończochy zdrowotne z dużym udziałem bawełny (60 %) są odpowiednie zwłaszcza dla pacjentów o wrażliwej skórze. Bawełnę dopełnia przyjemne mikrowłókno Lycra® w podwójnym oplocie. Produkcja tych wyrobów odbywa się według rygorystycznej normy RAL, a prawidłowe działanie wyrobów Avicenum 360 jest kontrolowane i certyfikowane przez prestiżowy niemiecki instytut Hohenstein.



Skład: 60 % Cotton (bawełna), 35 % Lycra, 5 % Nylon



Mikrokapsułki Skintex Anti-Heavy-Legs (zapobiegające efektowi ciężkich nóg) z wyciągami z grejpfruta, cytryny, mentolu, tymianku, cyprysu oraz mocznik. Mikrokapsułki stopniowo uwalniają mieszanę, która ma działanie regenerujące i odżywcze. Grejpfrut odnawia starzejące się komórki naskórka, cytryna działa odświeżająco i witalizująco na zmęczone stopy, mentol ma działanie odświeżające i chłodzące, tymianek delikatnie dezynfekuje skórę, cyprys wpływa na poprawę krążenia krwi i zapobiega nadmiernej potliwości, mocznik ma działanie nawilżające i antybakteryjne.

Dostępne rozmiary:


- 1k
- 2k
- 3k
- 4k
- 1d
- 2d
- 3d
- 4d

Długość nogi w przypadku podkolanówek A - D:

- 34 - 38 cm = K (krótkie)
- 38 - 43 cm = D (długie)

Pomiarów należy dokonywać na nieobrzękniętej kończynie. Trzeba też precyzyjnie dobrać siłę ucisku, w zależności od stopnia zaawansowania choroby. Dopasowanie stopnia ucisku ma bardzo duże znaczenie. Nie może on być zbyt delikatny, ponieważ będzie nieskuteczny. Z kolei zbyt silny ucisk może spowodować upośledzenie przepływu krwi w tętnicach kończyn dolnych.

a - obwód stopy
b - obwód w kostce
b1 - obwód łydki
c - obwód pod kolaniem
d - obwód nad kolaniem
f - obwód uda
g - obwód uda(5 cm poniżej kroku)
t - obwód pasa

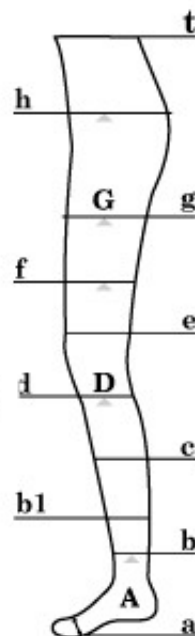

Rozmiar	1	1+	2	2+	3	3+	4	4+
a	19-25		22-28		25-31		28-34	
b	20-23		23-26		26-29		29-32	
b1	25-30		28-33		31-36		34-39	
c	32-38		35-41		38-44		41-47	
d	31-37		34-40		37-43		40-46	
e	33-39		36-42		39-45		42-48	
f	40-48	48-56	45-53	53-61	49-57	57-65	53-61	61-69
g	47-57	57-67	52-62	62-72	57-67	67-77	62-72	72-82
h	110		120		130			
t	80		90		100			

Terapia kompresyjna

Terapia kompresyjna to nieinwazyjna metoda leczenia przewlekłej niewydolności żyłnej, polegająca na wywieraniu na chorą kończynę ucisku, który jest najsilniejszy w okolicy stawu skokowego i stopniowo maleje w kierunku pachwiny. Powoduje to zwiększenie prędkości przepływu krwi w żyłach, poprawę wydolności zastawek, a dzięki temu zmniejszenie cofania się i zalegania krwi w żyłach powierzchownych, a więc również zmniejszenie ich średnicy. Zmniejszenie ciśnienia krwi żyłnej wpływa na poprawę stanu mikrokrążenia i zmniejszenie obrzęku.

Wskazania do stosowania terapii stopniowanym uciskiem:

- profilaktyka przewlekłej niewydolności żyłnej u osób z obciążeniem genetycznym

- wykonujących pracę wymagającą długotrwałego przebywania w pozycji stojącej lub siedzącej
- leczenie żylaków kończyn dolnych we wszystkich stopniach zaawansowania, jak i innych postaci klinicznych przewlekłej niewydolności żylniej
- profilaktyka i leczenie przewlekłej niewydolności żylniej u kobiet w ciąży
- przebyte operacyjne usunięcie żylaków lub skleroterapia
- obrzęki pourazowe
- zespół pozakrzepowy.

Kompresjoterapia - przeciwwskazania:

- zaawansowane zaburzenia krążenia tętniczego w kończynach dolnych
- ostre zapalenie skóry i tkanki podskórnej
- świeżo zdiagnozowana zakrzepica żył głębokich

Stosowanie pończoch uciskowych:

- wyroby uciskowe powinny być zakładane rano, przed wstaniem z łóżka (ponieważ nogi nie są wówczas jeszcze opuchnięte) i zdejmowane na noc
- przed założeniem należy zwinąć rajstopy, pończochy czy podkolanówki i zakładać stopniowo rozwijając, uważając, żeby pięta znajdowała się we właściwym miejscu, a materiał nie był zbyt rozciągnięty lub pofałdowany
- nie wolno uszkodzić struktury materiału, np. paznokciami
- należy unikać kontaktu materiału z maściami, kremami
- powinno się wymieniać produkty uciskowe co ok. 6 miesięcy
- podczas leczenia stopniowanym uciskiem pacjenci powinni co 3 miesiące zgłaszać się do lekarza w celu oceny tętna i krążenia obwodowego, a także przeprowadzenia aktualnych pomiarów kończyn.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: 8001

Rozmiar: wybierz , 1k , 2k , 3k , 4k , 1d , 2d , 3d , 4d