

Link do produktu: <https://redmed.pl/podkolanowki-wzmocnione-z-mikrokapsulkami-skintex-ahl-140-den-p-187.html>



Podkolanówki wzmocnione z mikro kapsułkami Skintex AHL - 140 DEN

Cena	21,99 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny
Numer katalogowy	podkolanowki kryjace
Zadzwoń i zamów:	+48322490070

Opis produktu

Podkolanówki kryjące AVICENUM 140 zapewniają wspomaganie krążenia krwi, wpływają na jego poprawę i wykazują działanie lecznicze w przypadku niewydolności żyłnej kończyn dolnych. Podtrzymujące wyroby pończochowe Avicenum 140 mają wypróbowany spadek nacisku w okolicy kostki ciśnienie wynosi 15-21 mmHg, w kierunku w górę obniża się. Stosowany nacisk klasyfikuje te wyroby do I klasy kompresyjnej. Wyroby Avicenum 140 ograniczają uczucie zmęczenia, obrzęki, uczucie ciężkości i napięcia w nogach. Działają jako prewencja w początkach niewydolności żyłnej. Wyroby te posiadają wzmocnione palce i piętę. Avicenum 140 mają tekstylne wykończenie kosmetyczne.



Skład 64 % Nylon, 36 % Lycra.



Mikrokapsułki Skintex Anti-Heavy-Legs (zapobiegające efektowi ciężkich nóg) z wyciągami z grejpfruta, cytryny, mentolu, tymianku, cyprysu oraz mocznik. Mikrokapsułki stopniowo uwalniają mieszankę, która ma działanie regenerujące i odżywcze. Grejpfrut odnawia starzejące się komórki naskórka, cytryna działa odświeżająco i witalizująco na zmęczone stopy, mentol ma działanie odświeżające i chłodzące, tymianek delikatnie dezynfekuje skórę, cyprys wpływa na poprawę krążenia krwi i zapobiega nadmiernej potliwości, mocznik ma działanie nawilżające i antybakteryjne.

Dostępne rozmiary:


- 1k
- 3k
- 1d

Długość nogi w przypadku podkolanówek A - D:

- do 37 cm = K (krótkie)
- od 37 cm = D (długie)

Pomiarów należy dokonywać na nieobrzękniętej kończynie. Trzeba też precyzyjnie dobrać siłę ucisku, w zależności od stopnia zaawansowania choroby. Dopasowanie stopnia ucisku ma bardzo duże znaczenie. Nie może on być zbyt delikatny, ponieważ będzie nieskuteczny. Z kolei zbyt silny ucisk może spowodować upośledzenie przepływu krwi w tętnicach kończyn dolnych.

- a - obwód stopy**
b - obwód w kostce
b1 - obwód łydki
c - obwód pod kolanem
d - obwód nad kolanem
f - obwód uda
g - obwód uda(5 cm poniżej kroku)
t - obwód pasa

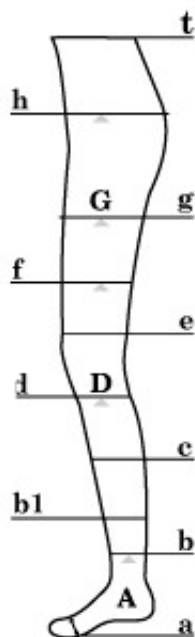

Obwód nogi	Rozmiary 1	Rozmiary 2	Rozmiary 3
t – obwód pasa	80	90	100
h – obwód bioder	110	120	130
g – obwód uda	50 - 55	55 - 60	60 - 66
f – obwód nad kolanem	46 - 50	50 - 54	54 - 58
d – obwód pod kolanem	34 - 37	37 - 40	40 - 44
b – obwód nad kostką	22 - 24	24 - 27	27 - 30

Terapia kompresyjna

Terapia kompresyjna to nieinwazyjna metoda leczenia przewlekłej niewydolności żyłnej, polegająca na wywieraniu na chorą kończynę ucisku, który jest najsilniejszy w okolicy stawu skokowego i stopniowo maleje w kierunku pachwiny. Powoduje to zwiększenie prędkości przepływu krwi w żyłach, poprawę wydolności zastawek, a dzięki temu zmniejszenie cofania się i zalegania krwi w żyłach powierzchownych, a więc również zmniejszenie ich średnicy. Zmniejszenie ciśnienia krwi żyłnej wpływa na poprawę stanu mikrokrążenia i zmniejszenie obrzęku.

Wskazania do stosowania terapii stopniowanym uciskiem:

- profilaktyka przewlekłej niewydolności żyłnej u osób z obciążeniem genetycznym
- wykonujących pracę wymagającą długotrwałego przebywania w pozycji stojącej lub siedzącej
- leczenie żylaków kończyn dolnych we wszystkich stopniach zaawansowania, jak i innych postaci klinicznych przewlekłej niewydolności żyłnej
- profilaktyka i leczenie przewlekłej niewydolności żyłnej u kobiet w ciąży
- przebyte operacyjne usunięcie żylaków lub skleroterapia
- obrzęki pourazowe
- zespół pozakrzepowy.

Kompresjoterapia - przeciwwskazania:

- zaawansowane zaburzenia krążenia tętniczego w kończynach dolnych
- ostre zapalenie skóry i tkanki podskórnej
- świeżo zdiagnozowana zakrzepica żył głębokich

Stosowanie pończoch uciskowych:

- wyroby uciskowe powinny być zakładane rano, przed wstaniem z łóżka (ponieważ nogi nie są wówczas jeszcze opuchnięte) i zdejmowane na noc
- przed założeniem należy zwinąć rajstopy, pończochy czy podkolanówki i zakładać stopniowo rozwijając, uważając, żeby pięta znajdowała się we właściwym miejscu, a materiał nie był zbyt rozciągnięty lub pofałdowany
- nie wolno uszkodzić struktury materiału, np. paznokciami
- należy unikać kontaktu materiału z maściami, kremami
- powinno się wymieniać produkty uciskowe co ok. 6 miesięcy
- podczas leczenia stopniowanym uciskiem pacjenci powinni co 3 miesiące zgłaszać się do lekarza w celu oceny tętna i krążenia obwodowego, a także przeprowadzenia aktualnych pomiarów kończyn.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: 8001 , 9999

Rozmiar: wybierz , 1k , 3k , 1d