

Link do produktu: <https://redmed.pl/refundacja-nfz-i-paski-do-qlabs-12-szt-pt-inr-testy-do-kontroli-krzepliwosci-krwi-do-monitora-qlab-s-q1-q2-q3-p-805.html>



Refundacja NFZ I Paski do qLabs 12 szt PT INR testy do kontroli krzepliwości krwi do Monitora qLab s Q1 Q2 Q3

Cena	30,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	dzień roboczy do 13:00
Numer katalogowy	RMPQS-1-12
Kod producenta	RQS-1-12
Kod EAN / GETIN	00856003003094
Producent	.Micropoint Biotechnologies Co.,
Data ważności testów:	21-07-2025
Refundacja NFZ	TAK, W przypadku braku refundacji w pole PIN oraz PESEL wpisać 0
Producent	Micropoint Biotechnologies Co., Ltd.
Podmiot Odpowiedzialny	Obelis S.A.
Cena NFZ	192,00 PLN

Opis produktu

Jednorazowe paski testowe do pomiaru PT/INR dla Monitora INR qLabs®. Szybkie, wygodne i proste określenie wartości krzepnięcia krwi z próbki z palca.

Monitor INR qLabs® jest narzędziem do diagnostyki in vitro u pacjentów zażywających doustne leki antykoagulacyjne, przeciwzakrzepowe, którzy potrzebują badać czas krzepnięcia krwi. Krzepnięcie krwi wyraża się jako czas protrombinowy (PT) lub wskaźnik INR.

Jednorazowe paski testowe są pakowane indywidualnie w hermetyczne opakowania foliowe, które zabezpieczają pasek przed wilgocią oraz pozwalają na wysoką jakość uzyskiwanych wyników, na równi z badaniami w laboratorium. Dodatkowo paski pakowane indywidualnie można wykorzystywać przez cały okres przeznaczony do użytku. Dzięki temu testów nie trzeba zużywać w jak najkrótszym czasie po otwarciu opakowania zbiorczego.


Zaawansowana technologia produkcji pasków testowych do Monitora INR pozwoliła na zastosowanie dodatkowej kontroli jakości testu. Zabezpiecza to przed podawaniem nieprawdziwych wyników badania.

Do określenia wskaźnika krzepliwości krwi jest potrzebna jedynie mała próbka krwi z opuszka palca.

Paski testowe można trzymać w temperaturze pokojowej, gotowe do natychmiastowego użycia.

Paski testowe przeznaczone są do samodzielnej kontroli gęstości krwi przez pacjenta.

Zastosowana nowoczesna technologia produkcji pozwala na uzyskiwanie bardzo wysokiej precyzji i dokładności wyników.

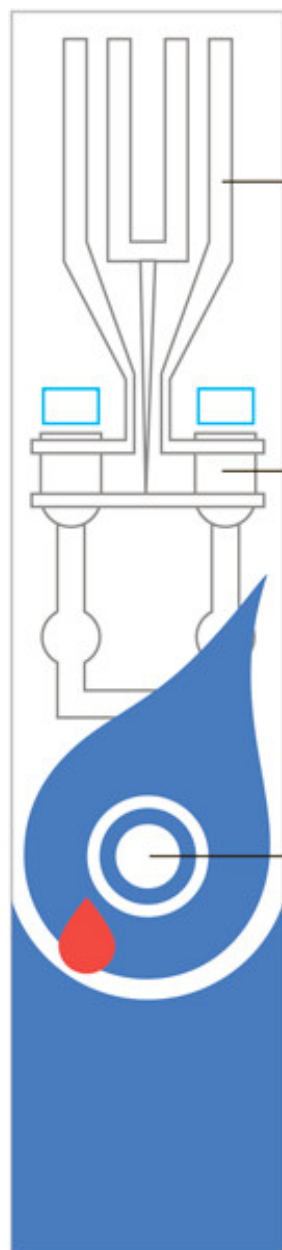

3 Strefa reakcyjna zawiera dwie metalowe elektrody, na których stosuje się stałe napięcie.

2 W strefie reakcyjnej, krew miesza się z odczynnikami aktywującymi krzepnięcie.

1 Kropla krwi, naniesiona na pasek testowy, doprowadza jest kanałami kapilarnymi do strefy reakcyjnej.

Monitor INR Micropoint qLabs® to nowoczesny system do szybkiego i precyzyjnego badania czasu protrombinowego (PT) oraz oznaczenia wskaźnika INR z krwi z palca. Aparat do pomiaru INR jest łatwy i prosty w obsłudze, aby pacjent mógł wykonać samodzielnie badanie krzepliwości krwi. MonitorINR oferuje wyniki o jakości laboratoryjnej, dostępne w ciągu kilku minut, tak w punkcie opieki, jak i w domu.

Cechy paska testowego MonitorINR qLabs