

Link do produktu: <https://redmed.pl/qlabs-q-2-plus-zastosowanie-profesjonalne-pomiar-inr-aptt-pt-q2-dla-lekarzy-i-pielegniarek-na-odzialy-szpitalne-p-817.html>



qLabs Q-2 Plus zastosowanie profesjonalne, pomiar INR, aPTT, PT, Q2 dla lekarzy i pielęgniarek na oddziały szpitalne

Cena	1 998,00 zł
Dostępność	Czekamy na dostawę
Czas wysyłki	dzień roboczy do 13:00
Numer katalogowy	Q-2
Kod EAN / GETIN	856003003322
Producent	.Micropoint Biotechnologies Co.,
Producent	Micropoint Biotechnologies Co., Ltd.
Podmiot Odpowiedzialny	Obelis S.A.

Opis produktu

System qLabs® Q-2 Plus to najnowszy monitor krzepliwości krwi dla profesjonalnego personelu medycznego. Szybkie i precyzyjne określanie czasu protrombinowego (PT), wskaźnika INR i czasu kaolinowo-kefalinowego (APTT) z krwi pełnej z palca.

Możliwość badania trzech parametrów krzepliwości krwi, osobno lub kilku naraz: test PT/INR, test APPT i test PT/APTT

Wbudowany czytnik kodów kreskowych

Do badania jest potrzebne jedynie 10 µL krwi z opuszka palca.

Wbudowana kontrola jakości (QC) daje pewność jakości wyników, minimalizuje ryzyko nieprawidłowego pomiaru.

Wykonanie testu i uzyskanie wyników zajmuje niewiele czasu. Aktualne wyniki mogą być dostępne jeszcze w trakcie konsultacji z pacjentem.

Własna pamięć w której może przechowywać aż do 200 ostatnich wyników badań.

Zaawansowana technologia biosensoryczna analizatora umożliwia szybkie i kompleksowe wykonanie pomiaru krzepliwości z krwi kapilarnej. System jest łatwy i tani w konserwacji i utrzymaniu, składa się z przenośnego analizatora do pomiaru oraz jednorazowych, indywidualnie pakowanych pasków testowych.

Czas kaolinowo-kefalinowy (APTT) i czas protrombinowy należą do podstawowych badań hemostazy. W przeszłości oba te wskaźniki mogły być oznaczane wyłącznie w laboratorium z próbki krwi żyłnej. Wraz z rozwojem urządzeń do diagnostyki POCT (point of care testing) oba te parametry mogą zostać jednocześnie oznaczone w prosty i szybki sposób.

System qLabs® Q-2 Plus znajduje zastosowanie na izbie przyjęć szpitali, oddziale ostrego dyżuru oraz oddziałach specjalistycznych, gdzie leczone są zaburzenia krzepnięcia krwi.

Analizator qLabs® Q-2 Plus został zaprojektowany dla placówek medycznych aby przy pomocy tylko jednego narzędzia można było określić wartość INR, PT i APTT dla różnych pacjentów z nieprawidłowym krzepnięciem krwi. Został wyposażony w

rozbudowane ustawienia oraz czytnik kodów kreskowych którym można automatycznie przypisać do każdego badania dane pacjenta, osoby wykonującej badanie, oraz kod indywidualnie pakowanych pasków testowych.

Aby maksymalnie dobrze móc zdiagnozować pacjenta, lub zmieniać dawkowanie leków, lekarz musi znać stopień krzepnięcia krwi. Wyniki wartości PT, INR i APTT otrzymane z badania pomagają personelowi medycznemu podejmować możliwe najlepsze decyzje. Szybki i precyzyjny pomiar gęstości krwi jest kluczowy dla bezpieczeństwa i skuteczności terapii przeciwzakrzepowej.



Czytnik kodów kreskowych znacznie ułatwia prowadzenie kart pacjenta i elektronicznej bazy danych.

Testy qLabs®

Integralnym elementem systemu qLabs® są indywidualnie pakowane paski testowe. Osobne opakowania chronią paski testowe przed czynnikami zewnętrznymi.

Zastosowanie takiego rozwiązania służy ochronie urządzenia i badanej próbki przed zanieczyszczeniem. Próbka nie zanieczyści analizatora powodując tym samym nieprawidłowe wyniki testu. Ponieważ nie wymaga czyszczenia po każdym badaniu, można wykonywać seryjne testy INR.

Zaawansowana technologia pasków testowych pozwoliła na zastosowanie dodatkowej kontroli jakości testu.

Nowoczesna technologia produkcji pozwala na uzyskiwanie bardzo wysokiej precyzji i dokładności wyników.

Testy mogą być przechowywane w temperaturze pokojowej, co dodatkowo zmniejsza koszty ich przechowywania.

Dostępne są paski testowe do badania

- PT/INR
- APPT
- PT/APTT

w opakowaniach po 12, 24 i 48 pasków.

Parametry

- Próbką: 10 µL krwi pełnej włośniczkowej.
- CPU: 32 V1 ColdFire
- Ekran: 128×96 LCD
- Pamięć: 200 ostatnich wyników
- Skaner kodów kreskowych: Laser Class 2, według EN 60825-1:2007
- Zasilanie:
 - Baterie: 4 X baterie alkaliczne AA
 - Zasilacz: 110-240 V AC, 50-60 Hz
 - Wyjście: 6 V DC
 - Moc: 12 V A
- Rozmiar: dł: 135 mm; szer: 65 mm; wys: 34.5 mm;
- Waga: 154 g (bez baterii)

Znak



Deklaracja zgodności: Urządzenie i testy qLabs[®] firmy Micropoint spełniają wymogi norm regulacyjnych UE w zakresie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro - dyrektywa 98/79/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady ("dyrektywa IVD"). Posiadają oznaczenie znakiem CE0123 wydanym przez Niemiecki instytut ds. jakości TÜV SÜD.

Warunki pracy:

- Temperatura: od 10°C do 35°C
- Wilgotność: od 10% do 90%

Akcesoria razem z analizatorem qLabs[®] Q-2 Plus:


- Zasilacz
- Instrukcja obsługi
- Pokrowiec transportowy
- Instruktażowy DVD
- Skrócona instrukcja obsługi
- Instalacyjne DVD z programem do zarządzania danymi
- Instrukcja obsługi programu do zarządzania danymi
- przewód do komputera

Opcje dodatkowe

Szkolenie

- Chorzów

GRATIS!

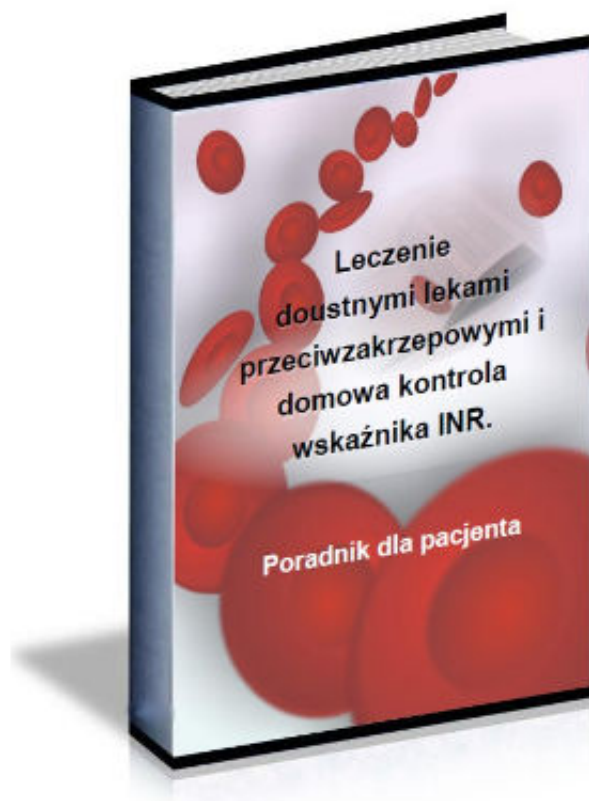

Na życzenie przy zakupie produktu qLabs można zamówić poradnik dla pacjenta: **Leczenie doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi i domowa kontrola krzepliwości krwi, w dowolnej ilości dla swoich pacjentów.**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Szkolenie z obsługi qLabs: Brak , Warszawa (+ 350,00 zł), Chorzów (+ 350,00 zł), Inna miejscowość (+ 350,00 zł)

Producent

Strona producenta www.monitorINR.com