

Link do produktu: <https://redmed.pl/testy-do-kontroli-inr-qlabs-24-szt-do-q1-q2-q3-p-810.html>

Testy do kontroli INR - qLabs 24 szt. do Q1 Q2 Q3

Cena	369,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	dzień roboczy do 13:00
Numer katalogowy	MPQS-1-24
Kod producenta	QS-1-24
Producent	.Micropoint Biotechnologies Co.,
Data ważności testów:	29-07-2025
Producent	Micropoint Biotechnologies Co., Ltd.
Podmiot Odpowiedzialny	Obelis S.A.

Opis produktu

UWAGA !!!

Ten produkt możesz kupić z refundacją NFZ, czyli dopłatą funduszu zdrowia, więcej informacji w [linku - Refundacja aparatów i pasków do pomiaru INR](#)

Jednorazowe paski testowe systemu qLabs® Q-1 do pomiaru PT/INR. Szybkie, wygodne i proste samodzielne określenie wartości krzepnięcia krwi z próbki z palca.

Micropoint qLabs® Q-1 to nowoczesny system do szybkiego i precyzyjnego badania czasu protrombinowego (PT) oraz oznaczenia wskaźnika INR z krwi z palca. Aparat do pomiaru INR jest łatwy i prosty w obsłudze, aby pacjent mógł wykonać samodzielnie badanie krzepliwości krwi. Micropoint qLabs® oferuje wyniki o jakości laboratoryjnej, dostępne w ciągu kilku minut, tak w punkcie opieki, jak i w domu.

Testy qLabs® Q-1

- Zakres pomiarowy PT-INR: od 0,5 do 8,0
- Próbką: 10 µL krwi z palca lub pełnej krwi żyłnej
- Precyzja: ≤ 5%
- Czas wykonania testu: 30~100 s

Jednorazowe paski testowe są pakowane indywidualnie w hermetyczne opakowania foliowe, które zabezpieczają pasek przed wilgocią oraz pozwalają na wysoką jakość uzyskiwanych wyników, na równi z badaniami w laboratorium. Dodatkowo paski pakowane indywidualnie można wykorzystywać przez cały okres przeznaczony do użytku. Dzięki temu testów nie trzeba zużywać w jak najkrótszym czasie po otwarciu opakowania zbiorczego. Paski testowe można trzymać w temperaturze pokojowej, gotowe do natychmiastowego użycia.

Zaawansowana technologia produkcji pasków testowych do qLabs® Q-1 pozwoliła na zastosowanie dodatkowej kontroli jakości testu. Zabezpiecza to przed podawaniem nieprawdziwych wyników gęstości krwi badania.

Opakowanie pasków testowych qLabs® Q-1 zawiera:


- 24 pasków testowych PT/INR
- Polska instrukcja obsługi

Każdy pasek testowy zawiera:

- Kanał z odczytnikiem: Rekombinowana ludzka tromboplastyna.
- Kanał kontrolny: Trombina - pokazuje predefiniowane czasy krzepnięcia dla kontroli.


- Oba kanały: Środek zobojętniający heparynę.

Paski należy przechowywać w temperaturze poniżej 32° C do końca okresu przydatności do użycia.
Testy paskowe INR należy zużyć w ciągu 10 minut od otwarcia opakowania foliowego.

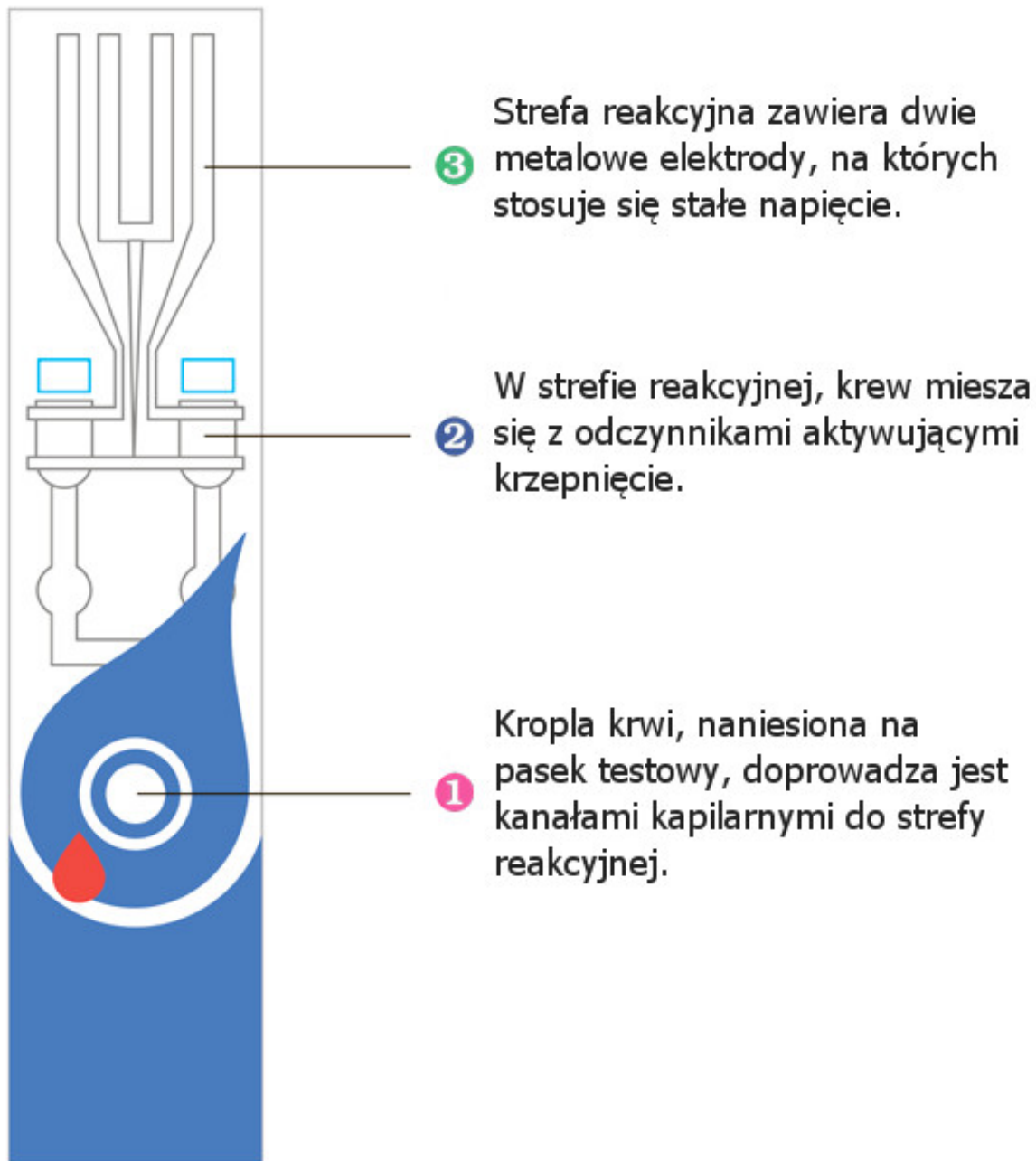

Uwaga: Paski testowe są zawsze dostarczane w opakowaniu zbiorczym po 12, 24 lub 48 szt.

GRATIS!

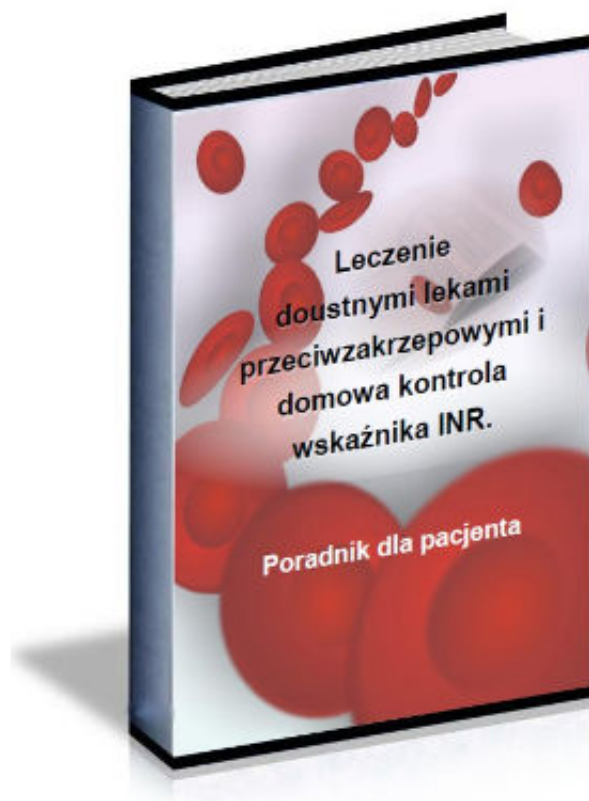

Na życzenie przy zakupie produktu qLabs można zamówić poradnik dla pacjenta: **Leczenie doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi i domowa kontrola krzepliwości krwi.**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Nakłuwacze INR: ---- Nie potrzebuję ---- , Medlance INR 23G 1.8mm 2x10szt. [HTL7006-10] Super PROMO (+ 10,80 zł)

Producent

Strona producenta www.monitorINR.com