

Link do produktu: <https://redmed.pl/testy-pt-inr-qlabs-3-szt-w-opakowaniu-do-analizatora-qlabs-p-1073.html>

Testy PT-INR qLabs - 3 szt. w opakowaniu - do analizatora qLabs

Cena	57,78 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	dzień roboczy do 13:00
Numer katalogowy	MPQS-1-3
Kod producenta	QS-1-3
Producent	.Micropoint Biotechnologies Co.,
Data ważności testów:	29-07-2025
Producent	Micropoint Biotechnologies Co., Ltd.
Podmiot Odpowiedzialny	Obelis S.A.

Opis produktu

UWAGA !!!

Ten produkt możesz kupić z refundacją NFZ, czyli dopłatą funduszu zdrowia, więcej informacji w [linku - Refundacja aparatów i pasków do pomiaru INR](#)

Jednorazowe testy systemu Micropoint qLabs® do pomiaru PT/INR. Testy umożliwiają szybkie i precyzyjne określenie wartości krzepnięcia krwi z próbki z palca. Paski testowe wyłącznie współpracują z analizatorem qLabs® Q-1.

Zaawansowana technologia produkcji pasków testowych pozwoliła na zastosowanie dodatkowej kontroli jakości testu qLabs® Q-1, zabezpiecza przed podawaniem nieprawdziwych wyników badania.

Najnowszy model Micropoint qLabs® to nowoczesny system do szybkiego i precyzyjnego badania czasu protrombinowego (PT) oraz oznaczenia wskaźnika INR z krwi z palca. Aparat do pomiaru INR jest łatwy i prosty w obsłudze, aby pacjent mógł wykonać samodzielnie badanie gęstości krwi. System qLabs® Q-1 oferuje wyniki o jakości laboratoryjnej, dostępne w ciągu kilku minut, tak w punkcie opieki, jak i w domu.

Pasek testowy qLabs® Q-1

- Zakres pomiarowy PT-INR: od 0,5 do 8,0
- Próbką: 10 µL krwi z palca lub pełnej krwi żyłnej
- Precyzja: ≤ 5%
- Czas wykonania testu: 30~100 s.
- Można trzymać w temperaturze pokojowej.
- Jednorazowe paski testowe są pakowane indywidualnie w hermetyczne opakowania foliowe.
- Maksymalny termin ważności pasków nieotworzonych pasków to 18 miesięcy.


Opakowanie zawiera:

- 3 paski testowe qLabs® PT/INR
- Polska instrukcja obsługi


Każdy pasek testowy zawiera:

- Kanał z odczynnikami: Rekombinowana ludzka tromboplastyna.
- Kanał kontrolny: Trombina - pokazuje predefiniowane czasy krzepnięcia dla kontroli.
- Oba kanały: Środek zobojętniający heparynę.

Paski należy przechowywać w temperaturze poniżej 32° C do końca okresu przydatności do użycia.
Testy paskowe INR należy zużyć w ciągu 10 minut od otwarcia opakowania foliowego.

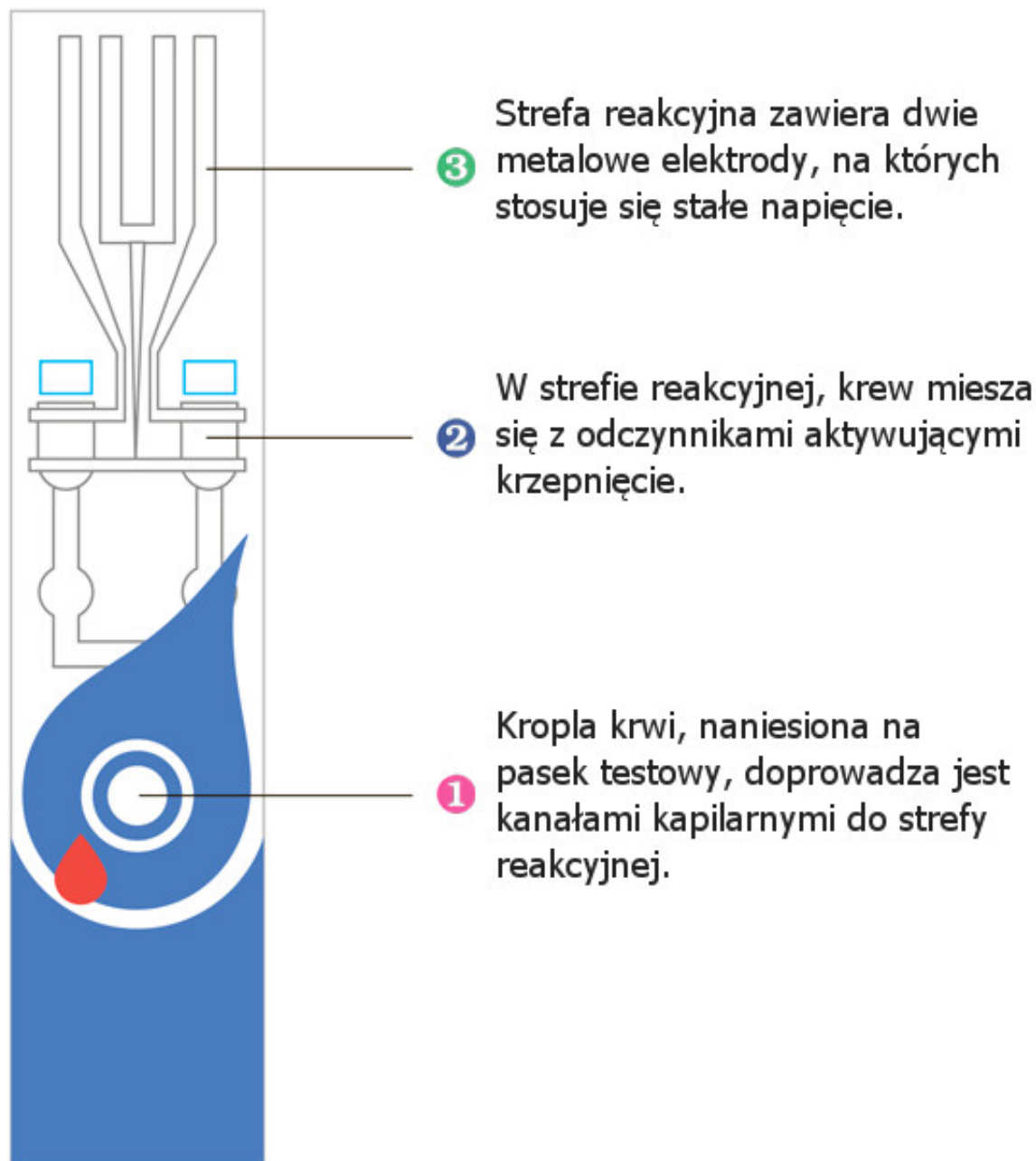

GRATIS!

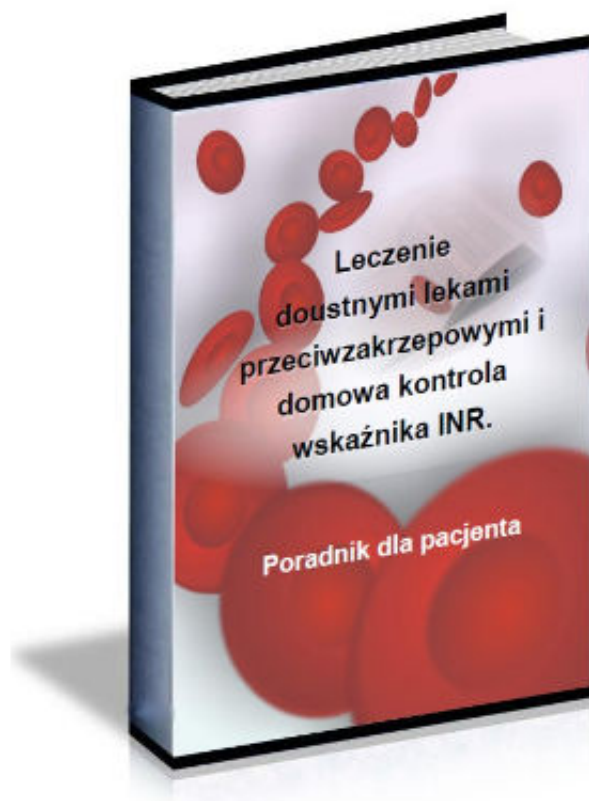

Na życzenie przy zakupie produktu qLabs można zamówić poradnik dla pacjenta: **Leczenie doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi i domowa kontrola krzepliwości krwi.**

Producent

Strona producenta www.monitorINR.com