

Link do produktu: <https://redmed.pl/testy-qlabs-6-szt-testy-do-badania-pt-inr-w-urzadzeniach-qlabs-p-1060.html>

Testy qLabs - 6 szt. testy do badania PT-INR w urządzeniach qLabs

Cena	119,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	dzień roboczy do 13:00
Numer katalogowy	MPQS-1-6
Kod producenta	QS-1-6
Producent	.Micropoint Biotechnologies Co.,
Data ważności testów:	29-07-2025
Producent	Micropoint Biotechnologies Co., Ltd.
Podmiot Odpowiedzialny	Obelis S.A.

Opis produktu

UWAGA !!!

Ten produkt możesz kupić z refundacją NFZ, czyli dopłatą funduszu zdrowia, więcej informacji w [linku - Refundacja aparatów i pasków do pomiaru INR](#)

Jednorazowe paski testowe dla systemu Micropoint qLabs® Q-1 i qLabs® Q-2 Plus do pomiaru PT/INR. Szybkie, wygodne i proste określenie wartości krzepnięcia krwi z próbki z palca.

Micropoint qLabs® to nowoczesny system do szybkiego i precyzyjnego pomiaru parametrów krzepliwości krwi z próbki krwi włóśniczkowej, którą można pobrać np. z palca. System qLabs® opiera się na przenośnym, poręcznym analizatorze, który oferuje wyniki o jakości laboratoryjnej, dostępne w ciągu kilku minut, tak w punkcie opieki, jak i w domu.


Jednorazowe paski testowe są pakowane indywidualnie w hermetyczne opakowania foliowe, które zabezpieczają pasek przed wilgocią oraz pozwalają na wysoką jakość uzyskiwanych wyników, na równi z badaniami w laboratorium. Dodatkowo paski pakowane indywidualnie można wykorzystywać przez cały okres przeznaczony do użytku. Dzięki temu testów nie trzeba zużywać w jak najkrótszym czasie po otwarciu opakowania zbiorczego.

Bardzo wysoka precyzji i dokładności i powtarzalność wyników.

Zaawansowana technologia produkcji pasków testowych pozwoliła na zastosowanie dodatkowej kontroli jakości testu. Zabezpiecza to przed podawaniem nieprawdziwych wyników badania.

Do określenia wskaźnika krzepliwości krwi jest potrzebna jedynie mała próbka krwi włóśniczkowej.

Paski testowe można trzymać w temperaturze pokojowej, są gotowe do natychmiastowego użycia.

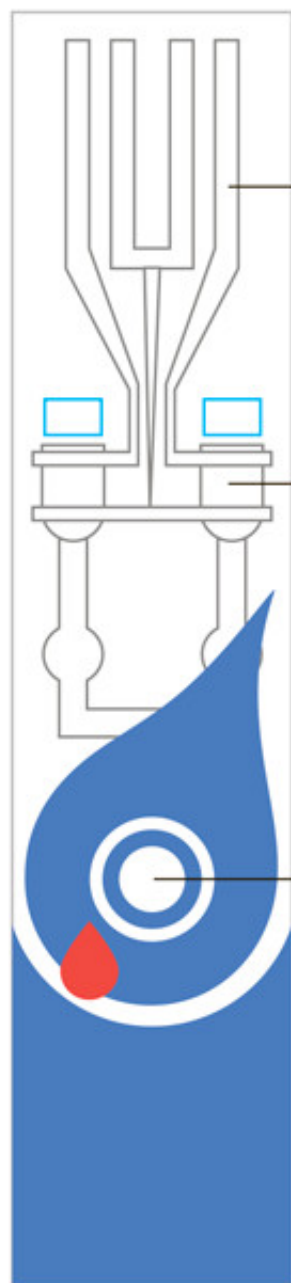

③ Strefa reakcyjna zawiera dwie metalowe elektrody, na których stosuje się stałe napięcie.

② W strefie reakcyjnej, krew miesza się z odczynnikami aktywującymi krzepnięcie.

① Kropla krwi, naniesiona na pasek testowy, doprowadza jest kanałami kapilarnymi do strefy reakcyjnej.

Parametry paska testowego qLabs® PT/INR

- Zakres pomiarowy: od 0,5 do 8,0
- Próbkę: 10 µL krwi z palca lub pełnej krwi żylnej
- Czas wykonania testu: 30~100 s.
- Zakres temperatury pracy: od 10 do 35 ° C
- Zakres wilgotności pracy: od 10 do 90%
- Stabilność poza folią: 10 minut
- Przechowywanie w temperaturze pokojowej, w torebce ze środkiem suszącym

Znak

C € 0123



Deklaracja zgodności: Urządzenie i testy qLabs firmy Micropoint spełniają wymogi norm regulacyjnych UE w zakresie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro - dyrektywa 98/79/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady ("dyrektywa IVD"). Posiadają oznaczenie znakiem CE0123 wydanym przez Niemiecki instytut ds. jakości TÜV SÜD.

Opakowanie pasków testowych MonitoraINR 6 szt.zawiera:

- 6 pasków testowych PT/INR
- Polska instrukcja obsługi

Każdy pasek testowy zawiera:

- Kanał z odczynnikiem: Rekombinowana ludzka tromboplastyna.
- Kanał kontrolny: Trombina - pokazuje predefiniowane czasy krzepnięcia dla kontroli.
- Oba kanały: Środek zobojętniający heparynę.

Paski należy przechowywać w temperaturze poniżej 32° C do końca okresu przydatności do użycia.
Testy paskowe INR należy zużyć w ciągu 10 minut od otwarcia opakowania foliowego.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Nakłuwacze INR: ---- Nie potrzebuję ---- , Medlance INR 23G, 1.8mm 10 szt. [HTL7006-10] PROMO (+ 0,27 zł)

Producent

Strona producenta www.monitorINR.com