

Link do produktu: <https://redmed.pl/zestaw-qlabs-q-2-plus-inr-pt-aptt-z-estation-dla-placowek-medycznych-p-821.html>

## Zestaw qLabs Q-2 Plus INR, PT. APTT, z eStation dla placówek medycznych

|                        |                                             |
|------------------------|---------------------------------------------|
| Cena                   | <b>3 996,00 zł</b>                          |
| Dostępność             | <b>Czekamy na dostawę</b>                   |
| Czas wysyłki           | <b>24 godziny</b>                           |
| Numer katalogowy       | <b>Q2+ MPMBI91-1</b>                        |
| Producent              | <b>.Micropoint Biotechnologies Co.,</b>     |
| Producent              | <b>Micropoint Biotechnologies Co., Ltd.</b> |
| Podmiot Odpowiedzialny | <b>Obelis S.A.</b>                          |

### Opis produktu

**Specjalny rabat dla aktualnych użytkowników systemu INRatio i INRatio2,  
o szczegóły zapytaj sprzedawców tel.: 327206210**

Zestaw składający się z monitora qLabs® Q-2 Plus oraz jego stacji dokującej eStation. Zaawansowany system pomiaru krzepliwości krwi dla profesjonalnego personelu medycznego.

System umożliwia szybkie i precyzyjne określanie czasu protrombinowego (PT), wskaźnika INR i czasu kaolinowo-kefalinowego (APTT) z krwi pełnej z palca, a następnie wydrukowanie wyniku przy pomocy wbudowanej drukarki stacji dokującej.

#### **Zestaw przenośnego analizatora qLabs® Q-2 Plus z stacją dokującą, potrafi:**

Test trzech parametrów krzepliwości krwi, osobno lub kilku naraz: PT/INR, APPT i PT/APTT

Do badania jest potrzebne jedynie 10 µL krwi z opuszka palca.

Wykonanie testu i uzyskanie wyników zajmuje niewiele czasu. Aktualne wyniki mogą być dostępne jeszcze w trakcie konsultacji z pacjentem.

Wbudowana kontrola jakości (QC) daje pewność jakości wyników, minimalizuje ryzyko nieprawidłowego pomiaru.

Wbudowany czytnik kodów kreskowych którym można automatycznie przypisać do każdego badania dane pacjenta, osoby wykonującej badanie, oraz kod indywidualnie pakowanych pasków testowych

Własna pamięć w której może przechowywać aż do 200 ostatnich wyników badań.

Drukowanie wyników zaraz po ich uzyskaniu

Przesyłanie danych z przenośnego analizatora do komputera

Stałe zasilanie systemu.

System qLabs® Q-2 Plus znajduje zastosowanie na izbie przyjęć szpitali, oddziale ostrego dyżuru oraz oddziałach specjalistycznych, gdzie leczone są zaburzenia krzepnięcia krwi.

Zestaw qLabs® Q-2 Plus z stacją dokującą został zaprojektowany dla placówek medycznych, jednym narzędziem diagnostycznym można określić wartość INR, PT i APTT u pacjentów wymagających badania krzepnięcia krwi. Został wyposażony w rozbudowane ustawienia, czytnik kodów kreskowych, drukarkę wyników i możliwość pobrania danych.

Wyniki wartości PT, INR i APTT otrzymane z badania pomagają personelowi medycznemu podejmować możliwe najlepsze decyzje. Szybki i precyzyjny pomiar gęstości krwi jest kluczowy dla bezpieczeństwa i skuteczności terapii przeciwzakrzepowej.

### Testy qLabs®

Integralnym elementem systemu qLabs® są indywidualnie pakowane paski testowe. Zastosowanie takiego rozwiązania służy ochronie urządzenia i badanej próbki przed zanieczyszczeniem. Próbkę nie zanieczyści analizatora powodując tym samym nieprawidłowe wyniki testu. Ponieważ nie wymaga czyszczenia po każdym badaniu, można wykonywać seryjne testy INR. Osobne opakowania chronią paski testowe przed czynnikami zewnętrznymi. Testy mogą być przechowywane w temperaturze pokojowej, co dodatkowo zmniejsza koszty ich przechowywania.

Testy są dostępne w opakowaniach po 12, 24 i 48 pasków do badania parametrów: PT/INR , APPT i PT/APTT

### Parametry Analizatora qLabs®

- Próbkę: 10 µL krwi pełnej z opuszka palca
- CPU: 32 V1 ColdFire
- Ekran: 128×96 LCD
- Pamięć: 200 ostatnich wyników
- Skaner kodów kreskowych: Laser Class 2, według EN 60825-1:2007
- Zasilanie:
- Baterie: 4 X baterie alkaliczne AA
- Zasilacz: 110-240 V AC, 50-60 Hz
- Wyjście: 6 V DC
- Moc: 12 V A
- Rozmiar: dł: 135mm; szer: 65mm; wys: 34.5mm;
- Waga: 154 g (bez baterii)

### Parametry qLabs® eStation

- Wydruk wyników z ręcznego urządzenia pomiarowego qLabs®
- Podłączanie do komputera,
- Stałe zasilanie monitora qLabs®
- Prosty mechanizm dokowania
- Wymiary: 232 mm x 150 mm x 66 mm
- Waga: 752 g
- Zasilanie
- Wejście: AC 100-240 V, 50/60 Hz
- Wyjście: DC 12 V
- Połączenie zewnętrzne: Port USB: USB typ B
- Temperatura pracy: 10 - 35 ° C
- Wilgotność pracy: 10 - 90% wilgotności względnej

Znak

# C € 0123



**Deklaracja zgodności:** Urządzenie i testy qLabs firmy Micropoint spełniają wymogi norm regulacyjnych UE w zakresie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro - dyrektywa 98/79/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady ("dyrektywa IVD"). Posiadają oznaczenie znakiem CE0123 wydanym przez Niemiecki instytut ds. jakości TÜV SÜD.


## Akcesoria w zestawie

- Zasilacz
- Instrukcja obsługi
- Pokrowiec transportowy
- Instruktażowy DVD
- Skrócona instrukcja obsługi
- Instalacyjne DVD z programem do zarządzania danymi
- Instrukcja obsługi programu do zarządzania danymi
- Złącze USB do komputera
- Papier do drukarki

## Szkolenie

- Chorzów

**GRATIS!**

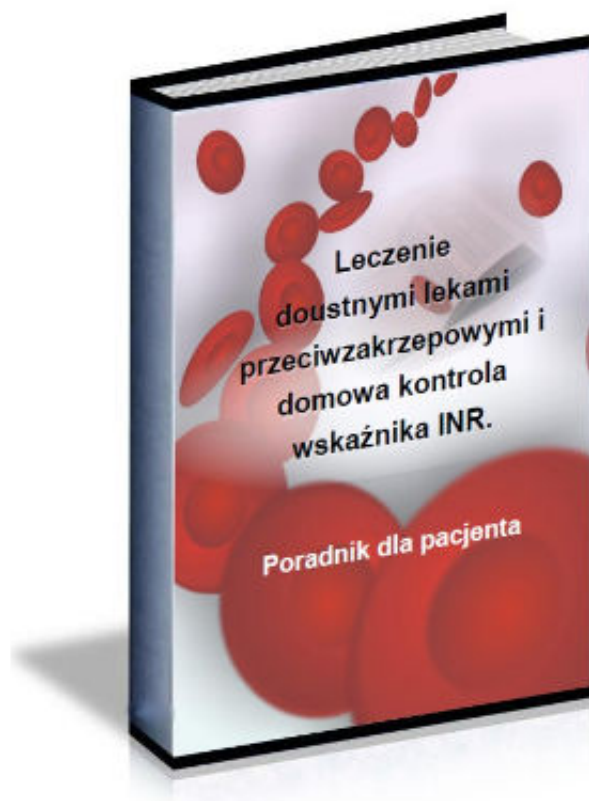

Na życzenie przy zakupie produktu qLabs można zamówić poradnik dla pacjenta: **Leczenie doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi i domowa kontrola krzepliwości krwi.**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Szkolenie z obsługi qLabs:** Brak , Warszawa (+ 350,00 zł ), Chorzów (+ 350,00 zł ), Inna miejscowość (+ 350,00 zł )

Producent

Strona producenta [www.monitorINR.com](http://www.monitorINR.com)